



Masážní přístroj nohou s využitím tlaku vzduchu

DJL-K818A



Návod k použití



Návod na použití masážního přístroje nohou s využitím tlaku vzduchu

Děkujeme, že jste si vybrali masážní přístroj nohou DJL-K818A. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a zejména související upozornění. Tento návod řádně uschovejte na nezbytně nutnou dobu.


Obsah

Vlastnosti výrobku	3
Náhradní díly a funkce	3
Pokyny k ovládacímu panelu	4
Provozní pokyny	4-5
Údržba výrobku a upozornění	5-6
Jednoduchá analýza poruch a jak je vyřešit	7
Specifikace	7

Vlastnosti výrobku

- Příjemný vzhled, výrobek je přenosný a pohodlný.
- Kombinace společně s masáží shiatsu, masáží hnětením, masáží tlakem vzduchu a funkcí ohřevu.
- Masáž hnětením a masáž shiatsu od prstů na nohou po paty zahrnuje všechny akupunkturní body.
- Funkce masáže tlakem vzduchu vás uvolní.
- Šest úrovní intenzity masáže tlakem vzduchu, nastavitelná rychlost masáže hnětením ve dvou úrovních.
- K dispozici je automatický pracovní režim a manuální pracovní režim, existuje nastavení dvou automatických pracovních režimů.
- Dvě úrovně nastavení teploty ohřevu: nízká, vysoká teplota.
- Funkce automatického vypnutí po 15 minutách.
- Bezpečné a spolehlivé napájení pomocí 12V adaptéru DC.

Náhradní díly a funkce

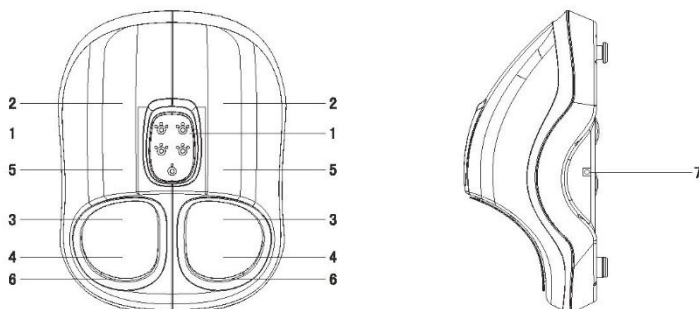

1. Ovládací panel: ovládání masážních funkcí výrobku.
2. Poloha rolovacích masážních hlavice: masáž oblasti přední části nohy.
3. Poloha masážních hlavice shiatsu: masáž oblasti nožní klenby.
4. Poloha hnětací masážní hlavice: masáž oblasti paty.
5. Poloha vzduchového vaku: poskytuje funkci masáže tlakem vzduchu.
6. Snímatelný a pratelný látkový potah.
7. Zásuvka DC.

Automatický pracovní režim

1. Stiskněte tlačítko „Auto“, spustí se automatický režim A (kontrolka vlevo se rozsvítí), v činnosti budou níže uvedené funkce:
 - A. Kombinovaná funkce masáže tlakem vzduchu s funkcí masáže hnětením.
 - B. Funkce masáže tlakem vzduchu.
 - C. Funkce masáže hnětením.

Výše uvedené tři druhy funkcí pracují v cyklu do doby automatického vypnutí v délce 15 minut.

2. Stiskněte znovu tlačítko „Auto“, spustí se automatický režim B (kontrolka vpravo se rozsvítí), v provozu budou níže uvedené funkce:
 - A. Režim masáže tlakem vzduchu.
 - B. Režim masáže hnětením.
 - C. Kombinovaný režim masáže tlakem vzduchu s režimem masáže hnětením.

Výše uvedené tři druhy funkcí pracují v cyklu do doby automatického vypnutí v délce 15 minut.

3. Stiskněte znovu tlačítko „Auto“, automatický pracovní režim se vypne, v činnosti je manuální pracovní režim.

Tento masážní přístroj má funkci „automatického vypnutí po 15 minutách“. Když doba masáže dosáhne 15 minut, přístroj se zastaví.

Údržba výrobku a upozornění

Abyste udrželi masážní přístroj v nejlepším stavu, dodržujte správné používání a věnujte pozornost níže uvedeným bodům.

1. Nemasírujte oblast na chodidle, kde existuje poranění nebo vředy.
2. Abyste předešli přetížení masážního přístroje, nestůjte na něm ani na něj nesedejte.
3. Na začátku nepoužívejte masáž nepřetržitě po dlouhou dobu. Poté, co se přizpůsobíte, můžete dobu používání masáže prodloužit.
4. Používejte pokaždé po dobu kratší než 30 minut.
5. Pokud během používání zaznamenáte jakékoli abnormální podmínky, jako je přehřátí nebo zápach, okamžitě přestaňte masážní přístroj používat a vypněte jej.
6. Po použití nejprve vypněte systém stisknutím tlačítka „Power“ (napájení) na ovladači a poté odpojte napájecí zástrčku z napájení AC. Nevytahujte napájecí kabel násilím.

7. Před čištěním produktů odpojte adaptér z napájecí zástrčky AC.
8. K čištění masážního přístroje použijte měkkou bavlněnou tkaninu a neutrální čisticí prostředek.
9. Pokud podstupujete lékařské ošetření nebo se u vás jedná o některý z následujících případů, poradte se prosím se svým lékařem a použijte přístroj v souladu s jeho pokyny.
 - Rakovina
 - Chronické nebo vážné onemocnění
 - Těžké onemocnění srdce
 - Kardiostimulátor
 - Jiné prostředky vyrobené z kovu, například protetické
 - Duševní porucha
 - Těhotné ženy nebo děti
10. Nevytahujte napájecí kabel masážního přístroje násilím nebo za něj netahejte.
11. Nepoužívejte masážní přístroj ve vodě ani na jiných vlhkých místech. Pokud masážní přístroj omylem spadne do vody, vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než jej vytáhnete z vody.
12. Pokud výrobek používáte, nepokládejte jej pod polštář nebo přikrývku.
13. Při používání masážního přístroje jej nijak nezakrývejte. Při zakrytí masážního přístroje bude teplota motoru příliš vysoká a může dojít k poruše nebo poškození.
14. Nepoužívejte masážní přístroj v blízkosti kamen nebo jiného zdroje tepla
15. Používejte originální příslušenství nebo součástky od výrobce tohoto masážního přístroje
16. Bez našeho povolení nerozebírejte masážní přístroj za účelem opravy. Jakákoli taková činnost způsobí, že uživatel ztratí naši záruku společně s poprodejním servisem.
17. Pro vaši osobní bezpečnost a životnost tohoto masážního přístroje neotevírejte zip. Neponeseme odpovědnost za žádné následky způsobené takovou činností.
18. Tento spotřebič není určen pro osoby, které jsou tělesně postižené, mají smyslovou nebo nervovou vadu nebo nemají dostatek zkušeností a zdravého rozumu k jeho používání, pokud nebudou při používání tohoto zařízení pod dohledem a vedením osob, které převezmou odpovědnost za jejich bezpečnost.
19. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
20. Osoba, která není citlivá na teplo, musí věnovat větší pozornost povrchu spotřebiče.


Jednoduchá analýza poruch a jak je vyřešit

Jev	Možná příčina	Jak problém vyřešit
Nefunguje?	1. Napájení není zapnuto	1. Připojte ke zdroji napájení
	2. Zástrčka má špatný kontakt	2. Zkontrolujte zástrčku
	3. Nebylo stisknuto tlačítko „Power“ (napájení)	3. Stiskněte tlačítko „Power“ (napájení)
Přestal fungovat?	1. Bez napájení	1. Zkontrolujte, zda je rozhraní napájení dobře připojeno
	2. Délka masáže je přes 15 minut	2. Znovu zapněte tlačítko „Power“ (napájení)

Specifikace

Název výrobku: Masážní přístroj nohou s využitím tlaku vzduchu

Model č.: DJL-K818A

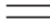Napětí: 12 V 

Výkon: 40 W

Distributor: Nanolab shop spol. s r.o., Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno
tel. 840 200 300

Poznámka



Pokud máte během používání pocit, že intenzita masáže tlakem vzduchu je příliš velká tak, že se cítíte nepohodlně, doporučujeme vám stisknout tlačítko „deflate“ (vyfouknout) po dobu 5 sekund, abyste toto nepohodlí zmírnili.